

LINET

Porodní lůžko AVE 2



AVE



reddot award 2017

Privítáme spolu nový život

Cesta začíná


Porodní lůžko AVE 2 je perfektní pro všechny fáze porodu. Rodičkám i rodinným příslušníkům navozuje pocit příjemného a bezpečného prostředí.



Atraktivní a funkční design již na první pohled.



Snadné a rychlé čištění.

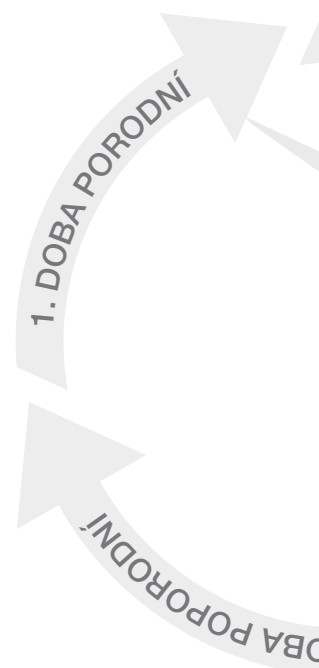

Nastavení do mimořádně nízké polohy 600 mm dává rodičkám větší jistotu a usnadňuje přístup k lůžku, které je díky tomu vhodné i pro cviky před vlastním porodem.



Rodičky si mohou svobodně zvolit polohu při porodu.



Maximální výška lůžka 1 050 mm je ideální pro polohu rodičky při poporodních zákrocích.



Komfortní matrace pro odpočinek ve fázi zotavování po porodu. Díky dalšímu vhodnému příslušenství lze lůžko použít také pro dobu poporodní.



2. DOBA PORODNÍ

3. DOBA PORODNÍ

Výhody lůžka AVE 2



- Svoboda volby porodních poloh
- Ano přirozeným porodům
- Maximální bezpečí pro dítě a rodičku



Pacient

- Intuitivní a snadné ovládání
- Hygiena bez kompromisů
- Minimální fyzická námaha



Personál

- Výjimečný moderní design
- Zvýšená úroveň péče



Management

V čem spočívá kouzlo

PODNOŽNÍ DÍL

Jednoduchý otočný mechanismus umožňuje zasunout podnožní díl pod lůžko pro urychlení a usnadnění vlastního porodu.

Podnožní díl zůstává připojený k lůžku a nemusí se skladovat mimo lůžko. Výhodou je omezení rizika vzniku infekcí a rovněž prevence poranění zad obsluhujícího personálu při manipulaci s podnožním dílem.



Podnožní díl je díky inovativnímu technickému řešení a vynikající pracovní ergonomii užitečnou pomůckou v celém procesu porodu.



Při naklonění je podnožní díl vhodný také jako podpora pro chodidla.



Vysunutím podnožního dílu vzniká na lůžku široká horizontální plocha s vysokou nosností. Je možné ji pohodlně a bezpečně využít i jako podložku pro dítě.

Podpěry nohou

Koncepce pevných nožních podpěr umožňuje zdravotnickému týmu flexibilně a účinně reagovat na nejrůznější situace během porodu.



Nožní podpěry lze nastavit do požadované polohy rychle a snadno jednou rukou.



Nastavení výšky nožní podpěry je možné přizpůsobit tělesným proporcím rodičky.

Při odklopení nožních podpěr mají lékař či sestra k rodičce snadný přístup.

SEDACÍ DÍL

Unikátní oválný tvar sedacího dílu je vhodný pro hladký průběh porodu a zároveň vytváří potřebný prostor pro přístup porodníka k pánevní oblasti rodičky.



RUČNÍ MADLA

Zvyšují komfort rodičky ve druhé době porodní.

Lůžko je vybaveno nezávislým elektrickým náklonem sedací části pro vyvýšení oblasti kostrční kosti.

ZDVIHOVÝ SLOUP

Inovativní teleskopické řešení umožňuje nastavení lůžka do výšky vhodné pro bezpečný přístup k rodičce a využití lůžka při zákrocích.

1050 MM

600 MM



Postranní madla

Postranní madla s integrovaným ovládacím panelem lze v případě potřeby zasunout, například při přesunu rodičky z jednoho lůžka na druhé. Madla se dají odklopit tiše a snadno jednou rukou a nevyžadují žádný dodatečný prostor vedle lůžka. Slouží jako opora při sedání nebo vstávání.



JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ

Integrovaný ovládací panel s piktogramy a symboly srozumitelnými rodičce i ošetřujícímu personálu. Zdravotníci mohou dle potřeby zablokovat ovládání pohybu lůžka.

Možnosti nastavení

- Nastavení výšky a náklonu
- Poloha Trendelenburg
- Blokování pohybu
- Podsvětlení lůžka (volitelné)
- Přivolání sestry (volitelné)



HYGIENA A BEZPEČNOST

Vysoký hygienický standard a kompaktní konstrukce dílů ložné plochy s plastovým krytem podvozku lůžka snižují čas nutný na vyčištění lůžka.

- Antibakteriální koženka
- Bezešvé polstrování
- Kompaktní a oddělený prostor
- Elektrostaticky lakováno epoxidovým práškovým antikorozním nátěrem

Pevná konstrukce porodního lůžka nemá žádné ostré body či hrany, což zvyšuje bezpečnost ošetřujícího personálu.



Bezpečnost





Trendelenburg



CPR

- Trendelenburg a CPR funkce
- Extra záložní baterie
- ABS – snadná dezinfekce
- Ovládání blokování pohybu
- Zvedací mechanismus bez nůžkové konstrukce
- Lehce přístupná centrální brzda
- Snadný transport lůžka pomocí směrového kolečka a transportního madla
- Odnímatelné čelo lůžka pro anesteziologa (volitelné)
- Přivolání sestry (volitelné)
- Držáky infuzního stojanu

Svoboda volby porodních



V pololeže v náklonu s podepřením nohou



V leže na boku



V pololeže v náklonu s chodidly opřenými o nožní podpěry



Ve vzpřímené poloze



V pololeže v náklonu s chodidly opřenými o podnožní díl



V sedě s využitím hrazdy

poloh



V poloze na všech čtyřech



V polosedě s využitím nožních podpěr



V polosedě s využitím podnožního dílu



Aplikace epidurální anestezie



Poporodní zákrok



V polosedě s asistencí partnera

Ano přirozeným porodům

Přirozený přístup k porodu bez dalších léčiv je nevhodnější, pokud si rodička přeje zachovat maximální kontrolu nad svým tělem, být aktivním účastníkem celého porodního procesu a absolvovat pouze minimální rutinní lékařské intervence. S náležitou přípravou a podporou se ženy často cítí posílněny a při porodu dítěte zažívají pocity hluboké spokojenosti. Proto říkáme ANO přirozeným porodům na porodním lůžku AVE 2!



BAREVNÁ PROVEDENÍ

Vyberte si z různých barevných provedení, která ladí s individuálním stylem interiéru na porodním sále.



Modrá



Žlutá



Oranžová



Zelená



Fialová

Příslušenství



Odnímatelné čelo lůžka



Nerezová miska s kolečky



Teleskopický infuzní stojan



Ruční dálkový ovladač



Podsvětlení podvozku




Výsuvná nerezová miska 4,5 l



Svrchní matrace



Přední držák

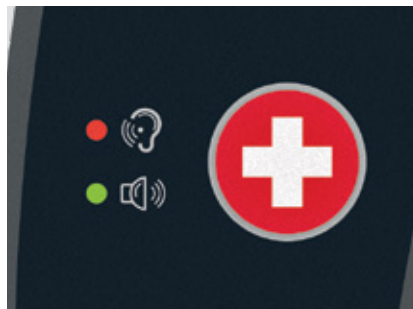

Přivolání sestry



Eurolišta



Podpurná čalouněná hrazda



Polštář

Parametry



TECHNICKÉ PARAMETRY

Celková délka ložné plochy	2 122 mm
Minimální délka v základním stavu	1 570 mm
Celková šířka	980 mm
Průměr koleček	150 mm
Minimální výška	600 mm
Maximální výška	1 050 mm
Úhel nastavení zádového dílu	-10°/+70°
Úhel nastavení sedacího dílu	0°/+18,5°
Poloha Trendelenburg	0°/-10°
Vertikální nastavení nožních podpěr	0°/+135°
Horizontální nastavení nožních podpěr	0°/+60°
Úhel nastavení podnožního dílu	0°/-22°
Maximální zatížení ložné plochy	240 kg
Celková hmotnost lůžka	245 kg

ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Baterie – záložní	24 V/ 1,2 Ah
Napájení – vstup	230 V
Napájení motoru	24 V
IP krytí porodního lůžka	IPX4
Zařízení	třída I.
Klasifikace použitých součástí B	

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Nožní podpěry s popruhy na nohy (pár)
- Záložní baterie
- Výsuvný podnožní díl včetně polstrování
- Bezešvá matrace z koženky s bakteriostatickým účinkem
- Elektrický ovladač pro Trendelenburg a manuální CPR
- Držák infuzního stojanu po obou stranách lůžka
- Boční madla s ovládacími prvky
- Integrovaný panel s ovládacími prvky
- Ruční madla (pár)
- Kolečka 150 mm, 1 směrové kolečko
- Centrální brzda
- Ekvipotenciální svorka
- Síťový kabel dle vlastní volby
- Výběr standardního barevného provedení
- Balení

AVE 2

Pacient

- Svoboda volby porodních poloh
- Ano přirozeným porodům
- Maximální bezpečí pro dítě a rodičku



- Intuitivní a snadné ovládání
- Hygiena bez kompromisů
- Minimální fyzická námaha



Personál

Management

- Výjimečný moderní design
- Zvýšená úroveň péče



 wissner-
bosserhoff

LINET

Members of LINET Group

LINET, spol. s r.o.

Želečnice 5 | 274 01 Slaný | Česká republika

tel.: +420 312 576 400 | fax: +420 312 522 668 | e-mail: info@linet.cz | www.linet.cz



www.linet.cz