

Tom 2



navrženo pro šťastnější příběhy

TOM 2 – benefits

NOVÁ
PEDIATRICKÁ
BEZPEČNOSTNÍ
NORMA
EN 50637:2017





- Maximální bezpečí pro malé pacienty
- Přívětivý design s dětskými motivy



Pacient

- Plně elektricky polohovatelné lůžko
- Praktický neomezený přístup k pacientovi



Personál

- Výjimečný moderní design dětského lůžka
- Nová pediatrická bezpečnostní norma: EN 50637:2017




Management

Maximální bezpečí




BEZPEČNOSTNÍ KLÍČ

Ovládací panel je vybaven autorizačním mechanismem. Přiložení speciálního klíče ke kontrolnímu panelu zajišťí přepnutí do provozního módu

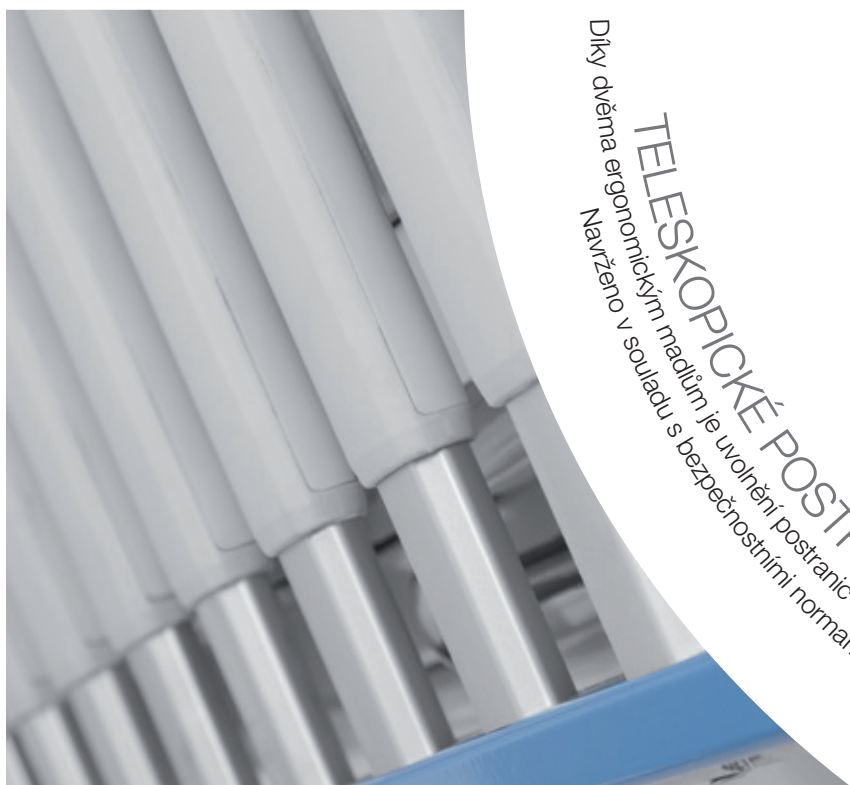

TELESKOPICKÉ POSTRANICE

Díky dvěma ergonomickým madlům je uvolnění postranic extrémně bezpečné. Navrženo v souladu s bezpečnostními normami.

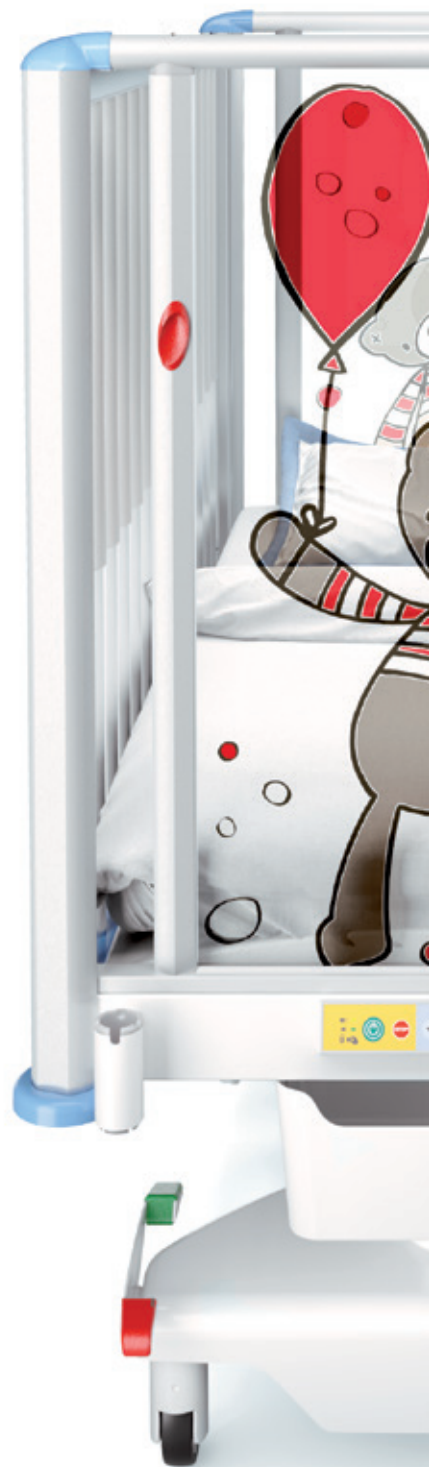




Umožňují úplný přístup k pacientovi, existují také ve verzi pro JIP.
ODNÍMATELNÁ ČELA LŮŽKA
Intuitivní a rychle dostupné odemknutí.
Panel vysoce odolný proti poškozování.



NULOVÁ MEZERA
Autoregrese zajišťuje stálou bezpečnostní mezeru mezi zádočným dílem
a hlavovým čelem lůžka.
Jsou zachovány ergonomické principy polohování.

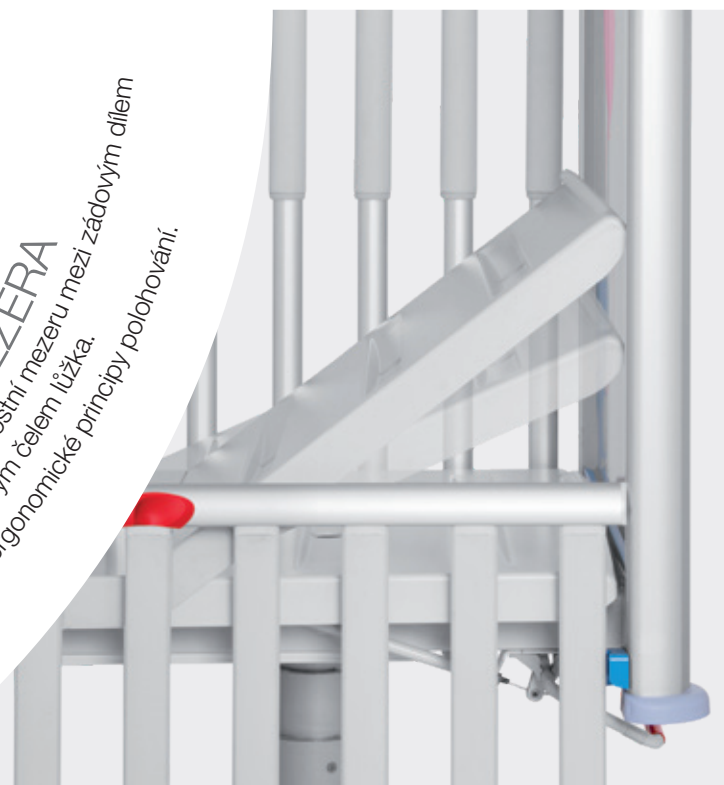

Pro pocit domova





UNIKÁTNÍ MODERNÍ DESIGN

průhledných čel umožňuje malému pacientovi neustálý kontakt s okolím, rodiče a personál jsou dítěti stále na blízku. Do hravého dětského světa plně zapadají barevné motivy potisků čel.



– KLIDNÝ SPÁNEK
– POCIT BEZPEČÍ



– DOKONALÝ PŘEHLED

Navrženo pro děti



Čisté linie, moderní materiály a svěží barvy působí příjemně na malé pacienty i jejich rodiče. Hliníkové a plastové části lůžka jsou doplněny barevnými detaily v modré nebo zelené barvě.



Pro péči s úsměvem





UNIKÁTNÍ TELESKOPICKÉ POSTRANICE

- Absolutně nejlepší přístup k dětským pacientům
- 5 nastavitelných poloh výšky postranic



◀ 80 cm **Maximum**
BEZPEČNOST

◀ Mezipoloha

◀ 40 cm **Lepší**
PŘEHLED

◀ Mezipoloha

◀ 0 cm **Nejsnazší**
PŘÍSTUP

◀ 13 cm

Bezpečný
prostor pod
postranicí ve
všech jejích
polohách.



DRŽÁKY INFÚZNÍCH STOJANŮ

Nové umístění IV držáků,
které jsou připojeny přímo k
rámu lůžka v souladu s novou
normou: Standard 50637.

Pohodlné polohování



ELEKTRICKÉ POLOHOVÁNÍ

Pomocí ovladače lze nastavit výšku lůžka, náklon zádového dílu a polohy TR/ATR. Bezpečnostní jištění proti nechtěnému pohybu lůžka zajišťují GO tlačítko nebo STOP tlačítko.

Komfortní VYŠETŘENÍ

83 cm ▶

Bezpečné OPUŠTĚNÍ LŮŽKA

58 cm ▶

SLOUPOVÁ KONSTRUKCE

je jednou z nejvýraznějších funkcí lůžka a umožňuje nastavení výšky.

Zajišťuje dokonalou stabilitu, hygienu a neomezený přístup ke všem částem lůžka.



Praktické detaily

- 1 Noční podsvětlení
- 2 Držáky příslušenství
- 3 Box na příslušenství
- 4 Lišty na příslušenství
- 5 Centrální brzdění lůžka
- 6 Ruční CPR
- 7 Mini ACP





ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Napájení	230 V/±10 %
Maximální příkon	max. 1,6 A; 370 VA
Ochrana proti vniknutí vody a prachu	IPX4

CERTIFIKÁTY

Společnost LINET je certifikována podle evropských norem a kvality. EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-1-6, ISO 14971. Lůžko TOM 2 plně odpovídá nové normě pro pediatrická lůžka EN 50637:2017.

Společnost LINET dodržuje certifikovaný systém řízení jakosti podle následujících norem. ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485. MDSAP (Medical Device Single Audit Program).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vnější rozměry	151×83 cm
Doporučené rozměry matrace	137×70/10 cm
Bezpečné pracovní zatížení	80 kg
Výška ložné plochy (min.–max.) (elektricky nastavitelná)	58–83 cm
Úhel TR/ATR (elektricky nastavitelný)	15°/15°
Max. výška postranic	80 cm
Autoregrese zádového dílu	12,5 cm
Počet dílů ložné plochy	2
Hmotnost (v závislosti na vybavení)	120 kg
Maximální úhel zádového dílu (elektricky nastavitelný)	41°
Centrální ovládání koleček	ANO

Tom 2

Patient

- Maximální bezpečnost pro dětské pacienty
- Veselý design



- Plně elektricky ovládané lůžko
- Neomezený přístup k pacientovi



Personál

Vedení

- Výjimečný moderní design dětského lůžka
- Nová norma pro pediatrická lůžka EN 50637:2017



 wissner-
bosserhoff

LINET

Members of LINET Group

LINET spol. s r.o.

Želečnice 5 | 274 01 Slaný | Česká republika

tel.: +420 312 576 400 | fax: +420 312 522 668 | e-mail: info@linet.com | www.linet.com

