

**LINET**

# Eleganza Mano



Pacientský stolec k lůžku

Unikátní konstrukce patientského stolku umožňuje plné využití všech funkcí pacientem bez nutné asistence sestry. Díky tomu je Eleganza Mano efektivním prostředkem pro zvyšování samostatnosti pacienta, a zároveň pro snížení pracovní zátěže zdravotnického personálu.



- RUČNÍ OVLÁDÁNÍ KOLEČEK
- SAMOSTATNOST PACIENTA
- SNADNÝ PŘÍSTUP DO STOLKU
- ÚSPORA ČASU SESTRY
- SNADNÁ ČISTITELNOST

### RUČNÍ OVLÁDÁNÍ KOLEČEK


- Představuje patentované řešení společnosti Linet, které dovoluje snadné ovládání stolku pacientem z lůžka, a to s použitím jedné ruky.
- Pootočením ručního ovládání lze stolek zabrzdit či odbrzdit, pacient tak může se stolem snadno manipulovat a nastavit ho do vyhovující polohy.
- Vhodná pozice stolku umožňuje pacientovi plné a samostatné využití jídelní desky, zásuvek, poličky na podložní mísu, držáku ručníku a všech odkládacích míst stolku.



*Pootočením ručního ovládání lze stolek zabrzdit či odbrzdit.*

### SAMOSTATNOST PACIENTA

- Umožňuje pacientům vykonávat většinu denních potřeb samostatně.
- Posiluje sebedůvěru pacienta a jeho pocit soběstačnosti.
- Dovoluje pacientovi uspokojovat jeho bezprostřední potřeby bez nutnosti čekání na ošetřující personál.
- Snižuje počet případů, kdy je sestra přivolána pacientem.
- Snižuje fyzickou zátěž sester a redukuje množství stresujících situací způsobených častým voláním pacientů.

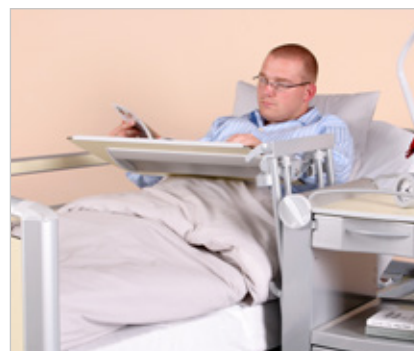

*Pacient může jídelní desku využít také jako podložku pro čtení a psaní.*



*Spodní velká zásuvka je vybavena praktickým držákem lahví.*

### TECHNICKÉ PARAMETRY

Vnější rozměry:	48 x 57,5 cm
Výška horní desky	88,5 cm
Výška (včetně madla)	94,5 cm
Rozměry jídelní desky	60 x 33,5 cm
Výška jídelní desky (kolečka 7,5 cm)	72 – 109 cm
Maximální zatížení ve středu jídelní desky	9 kg
Kolečka	7,5 cm
Hmotnost	33 kg